


# BASKETS

Nitinol-Körbchen  
*Nitinol Baskets*



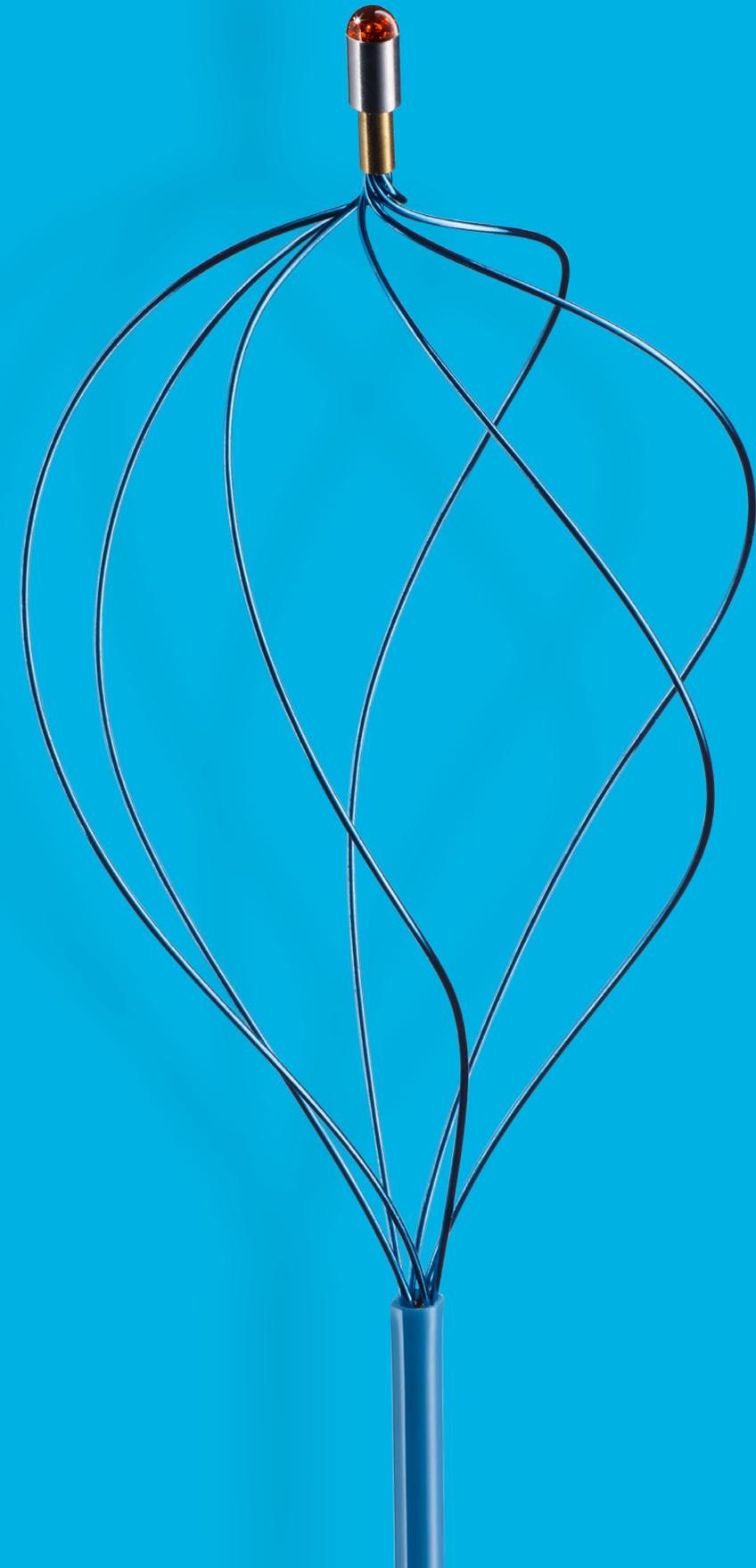

Langjährige Erfahrung in der Entwicklung und der Produktion von Steinfangkörbchen versetzen EPflex in die Lage, für jeden Anwendungsfall die entsprechenden Lösungen anzubieten.

Die superelastischen Eigenschaften von Nitinol, in Verbindung mit dem Know-How der Mitarbeiter, garantieren Produkte mit gleichbleibend hervorragender Qualität und hohem technischen Niveau.

*Through many years of experience gained in the development and production of baskets, EPflex is able to offer the right solution for each individual purpose.*

*The superelastic characteristics of Nitinol combined with the technical know-how of the employees guarantees products of continuous excellent quality and high technical level.*


**Sonderleistungen**  
*special services*

**Blister-  
verpackung**  
*blister package*


**Sonderformen**  
*special forms*

**Sonder-  
abmessungen**  
*special  
dimensions*


**Komponenten  
lieferbar**  
*components  
available*

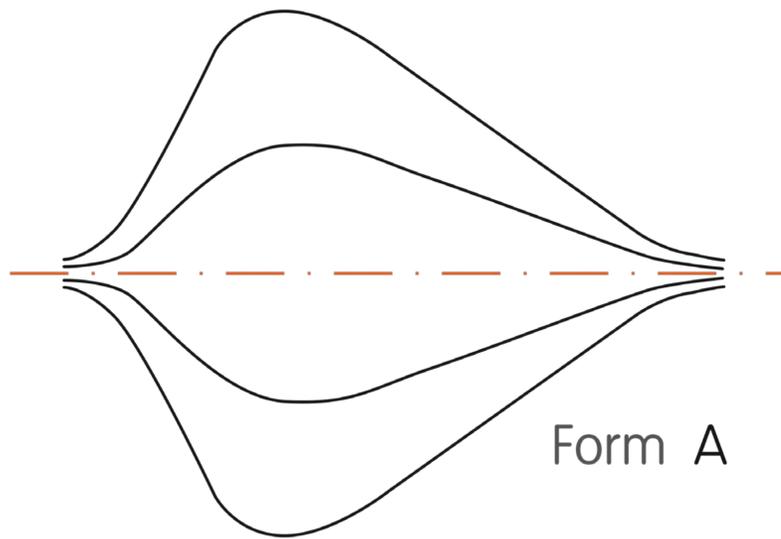


Form A

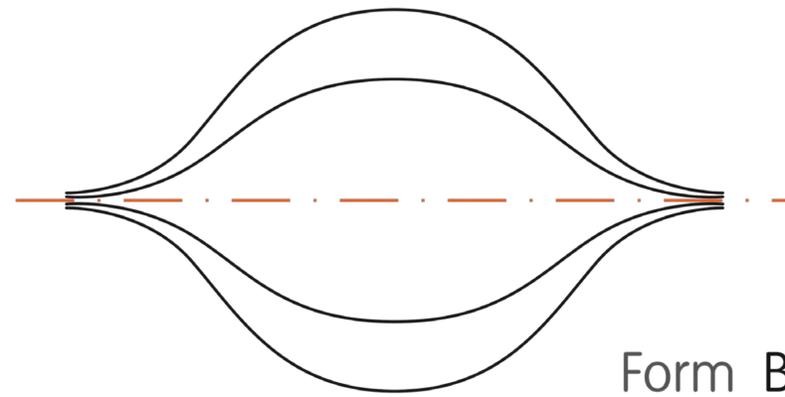


Form B

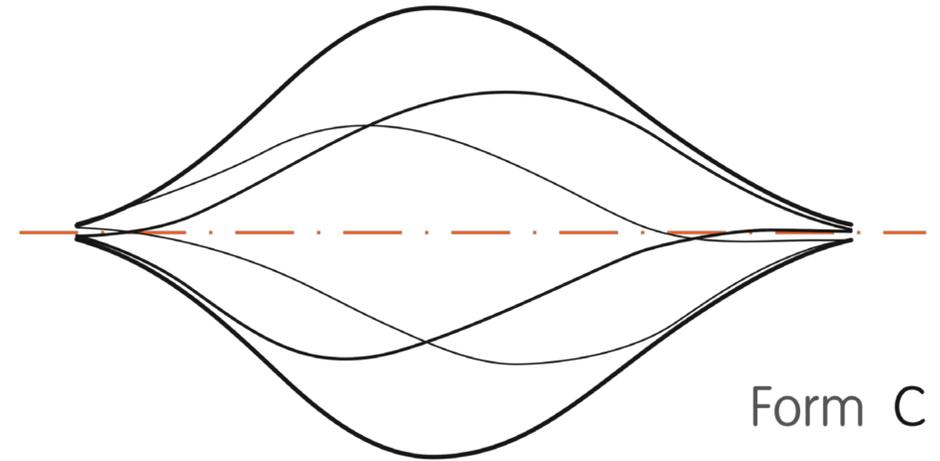

Form C

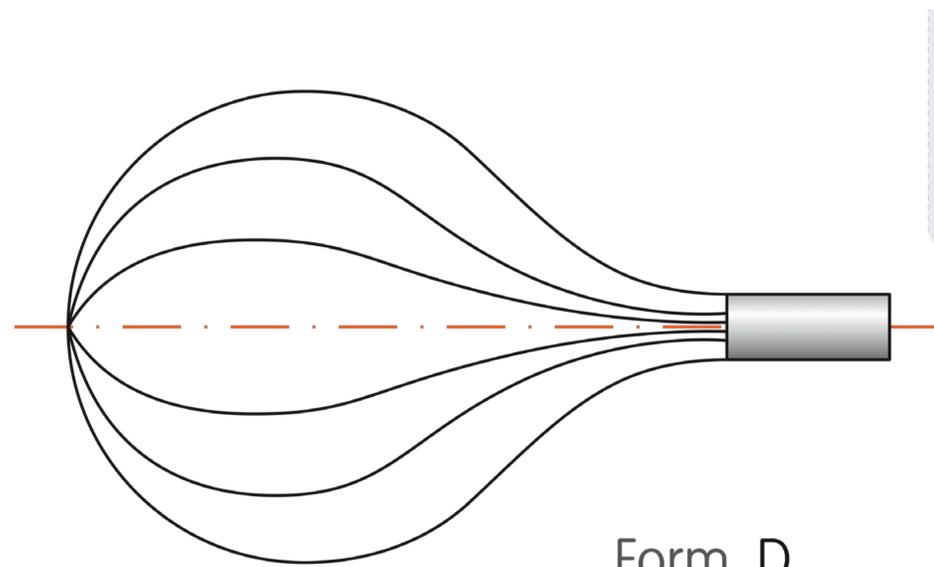

Form D

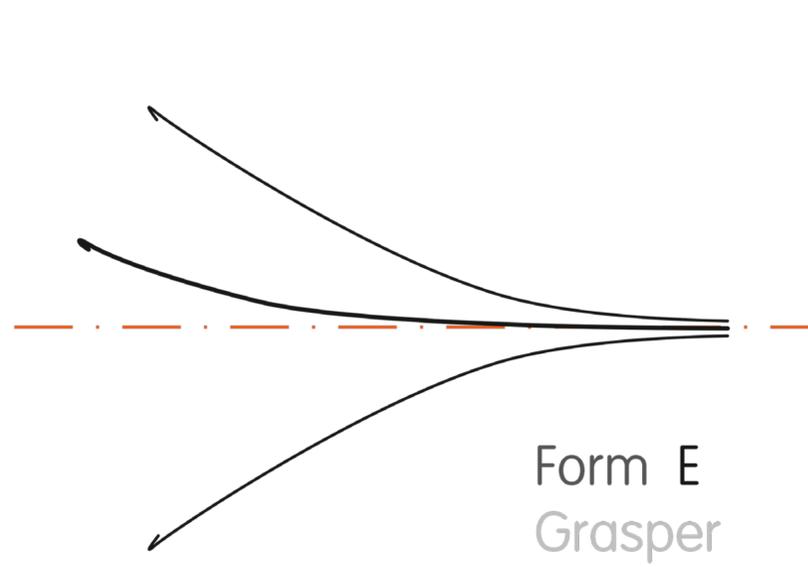


Form E  
Grasper


Anzahl der Drähte  
number of wires

3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, ...


**Körbchenformen**  
basket types

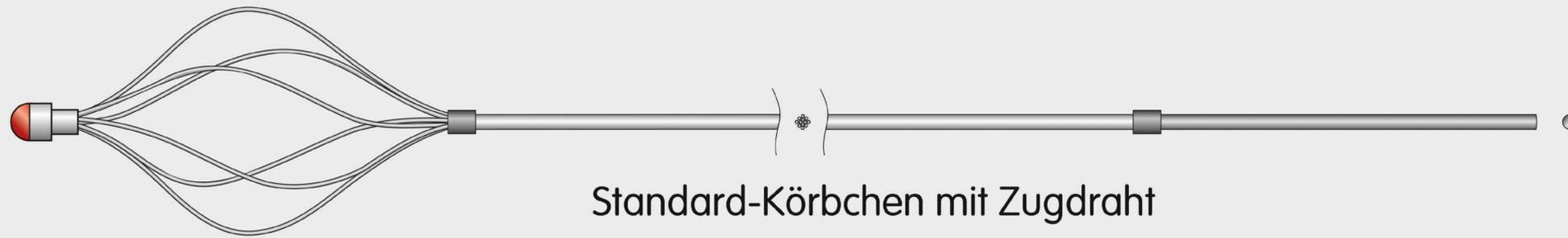

Standard-Körbchen mit Zugdraht  
standard basket with tensile wire

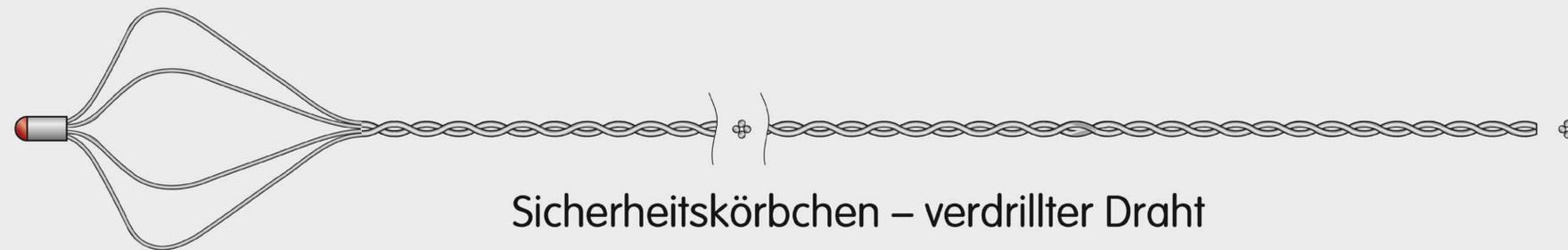

Sicherheitskörbchen – verdrellter Draht  
safety basket – twisted wire

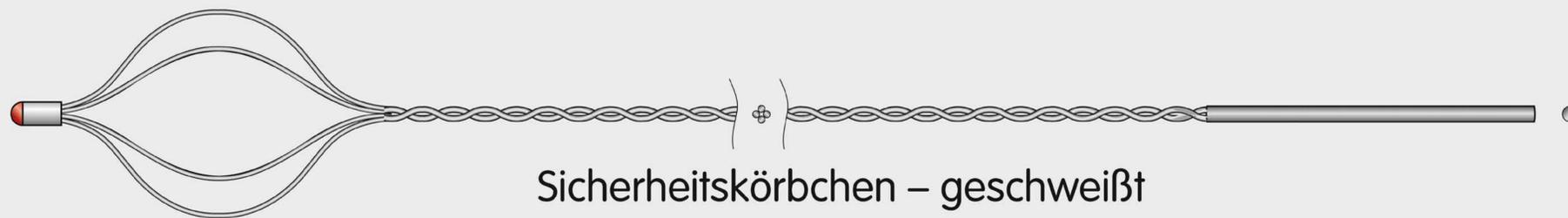

Sicherheitskörbchen – geschweißt  
safety basket – welded



Tipless Körbchen mit angeschliffenem Zugdraht  
tipless basket with grinded wire

**Konstruktionsart**  
construction type



## Abmessungen dimensions

Körbchendurchmesser  
basket diameter

3–40 mm

Körbchengröße  
basket size

1,2–8 French

0,38–2,6 mm

## Zugdrähte tensile wire

- » Edelmetalllitzen stainless steel braid
- » Edelmetalldraht stainless steel wire
- » Nitinolitzen Nitinol braid
- » Nitinoldraht Nitinol wire
- » beschichtet coated
- » unbeschichtet uncoated

## Schlaucheinheiten tube unit

Polyamide

< 2,5 French

Peek


2,5–3,5 French

Nylon

> 3,5 French



head A

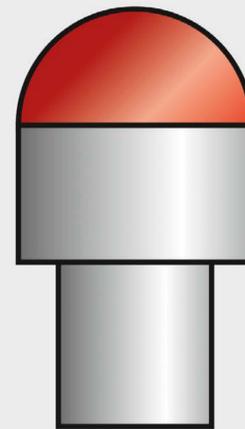

head B

**Spitzen**  
heads



Lösbar  
detachable

weiß  
white

Hublänge 93 mm  
stroke length 93 mm



Systemgriff lösbar  
System handle  
detachable

schwarz black  
blau blue

Hublänge 45 mm  
stroke length 45 mm



Torquer

diverse Farben  
diverse colours

**Handgriffe**  
handle



Anzahl Drähte number of wires **4 x 008-12-CS / 090 / 2.0 French**

Drahtdurchmesser wire diameter [inch]

Körbchendurchmesser basket diameter [mm]

Körbchenform basket type [A-E]

Nutzlänge working length [cm]

Schlauchdurchmesser tube diameter [French]

Bezeichnung  
description