


Nitinol Steinfanginstrumente

Nitinol stone retrieval devices

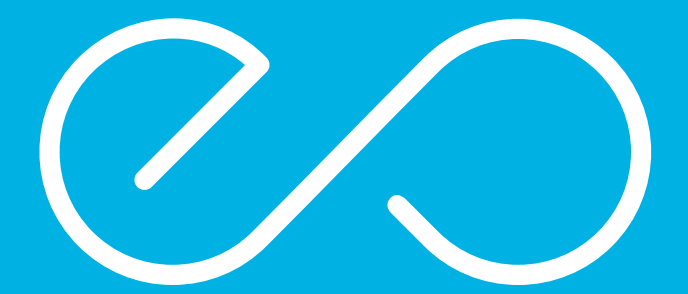

Langjährige Erfahrung in der Entwicklung und der Produktion von Steinfanginstrumenten versetzen EPflex in die Lage, für jeden Anwendungsfall die entsprechenden Lösungen anzubieten.

Die superelastischen Eigenschaften von Nitinol, in Verbindung mit dem Know-How der Mitarbeiter, garantieren Produkte mit gleichbleibend hervorragender Qualität und hohem technischen Niveau.

Through many years of experience gained in the development and production of stone retrieval devices, EPflex is able to offer the right solution for each individual purpose.

The superelastic characteristics of Nitinol combined with the technical know-how of the employees guarantees products of continuous excellent quality and high technical level.

CE Zulassung

CE certified

**Blister-
verpackung**

blister package

Sonderformen



special forms

**Sonder-
abmessungen**

*special
dimensions*

**Komponenten
lieferbar**

*components
available*

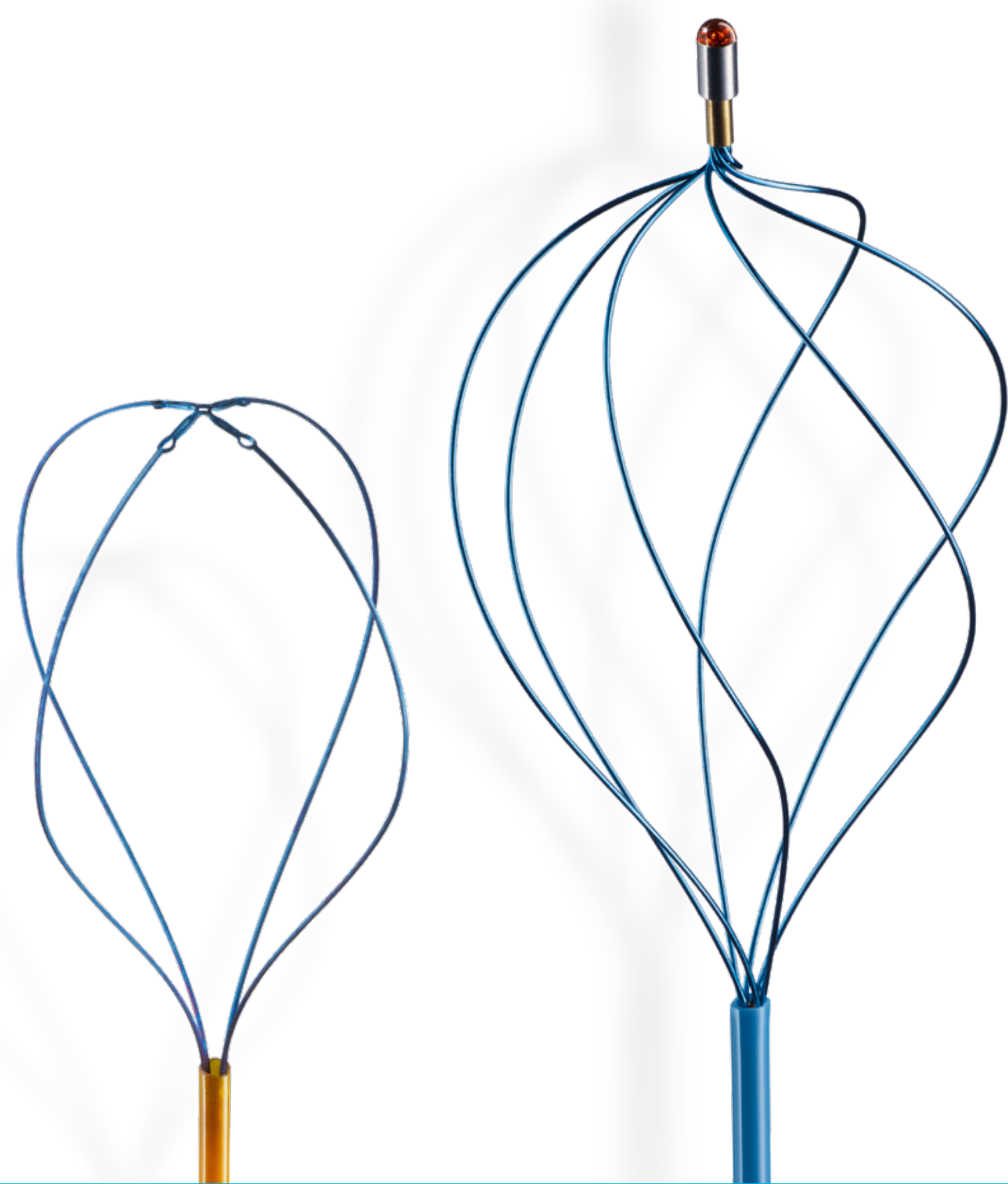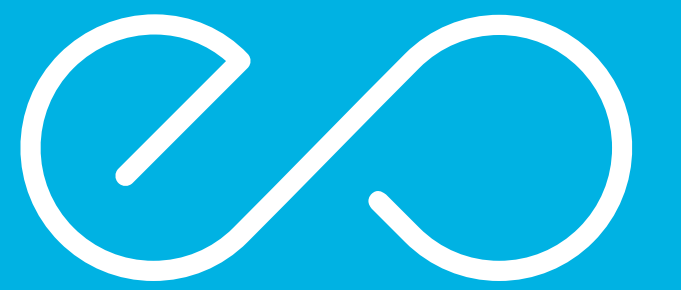

KÖRBCHEN

Wir sind Spezialist in Sachen Steinfangkörbchen für verschiedenste Anwendungen.

BASKETS

We are specialists in stone baskets for various applications.



GREIFER

Lasergeschnittene Greifarme mit Widerhaken halten den Stein absolut sicher.

GRASPER

Laser-cut grasping arms with barbs hold the stone absolutely safely.





THRILLER

Schlingenartiges Steinfanginstrument verbindet die Vorteile von Greifer und Körbchen.

THRILLER


A snare-like stone retrieval instrument combines the advantages of grasper and basket.

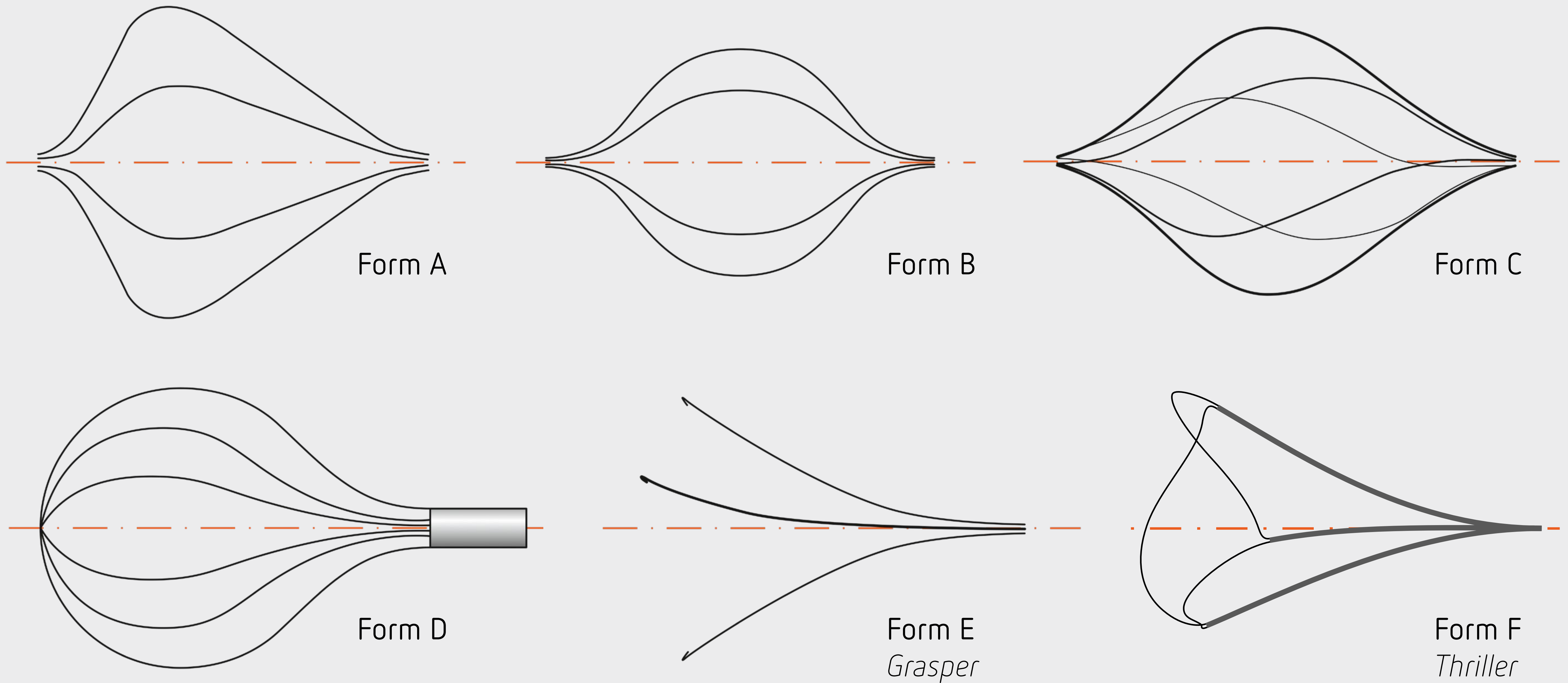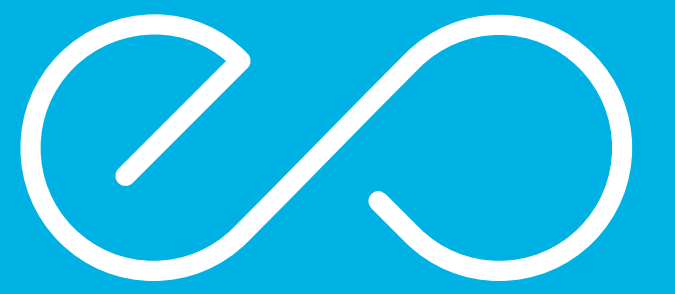


Anzahl der Drähte
number of wires

3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, ...


Formen
types

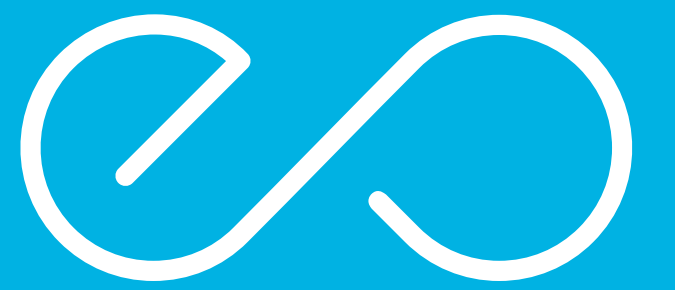


Standard-Körbchen mit Zugdraht
standard basket with tensile wire

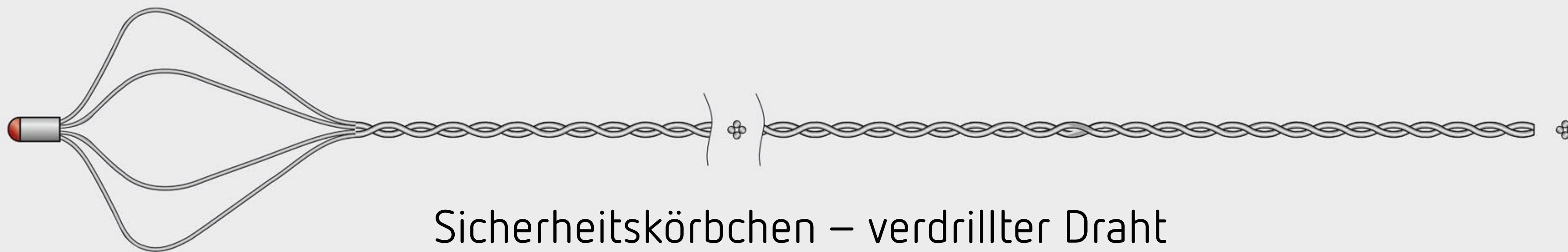

Sicherheitskörbchen – verdrehter Draht
safety basket – twisted wire

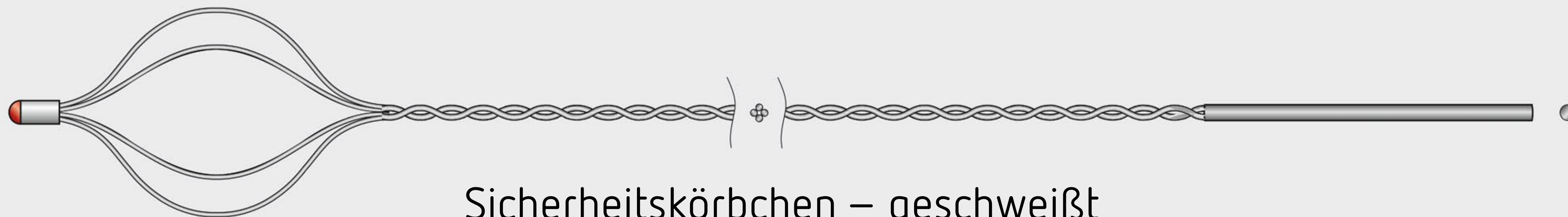


Sicherheitskörbchen – geschweißt
safety basket – welded

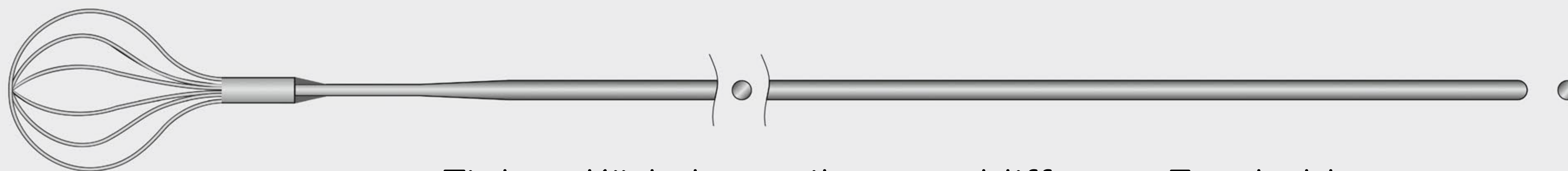

Tipless Körbchen mit angeschliffenem Zugdraht
tipless basket with ground wire

Konstruktionsart
construction types

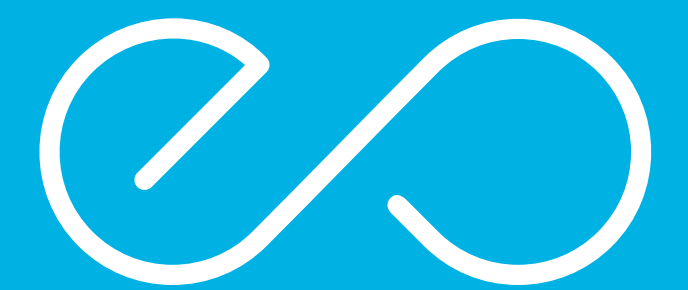

Abmessungen *dimensions*

Körbchendurchmesser
basket diameter

Körbchengröße
basket size

3 – 40 mm

1,2 – 8 French
0,38 – 2,6 mm

Zugdrähte *tensile wire*

Edelstahllitzen *stainless steel braid*

Edelstahldraht *stainless steel wire*

Nitinollitzen *Nitinol braid*

Nitinoldraht *Nitinol wire*

beschichtet *coated*

unbeschichtet *uncoated*

Schlaucheinheiten *tube unit*

Polyamide


< 2,5 French

Peek


2,5 – 3,5 French

Nylon

> 3,5 French

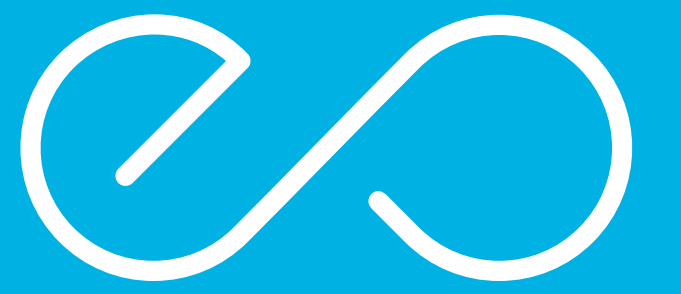


head A

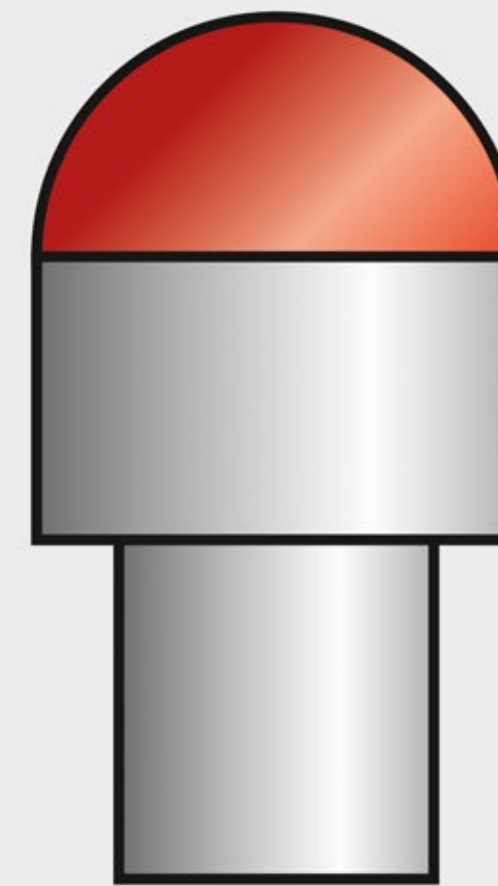

head B

Spitzen
heads

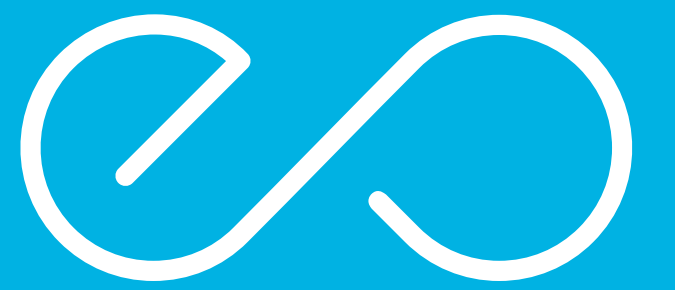

Lösbar
detachable

weiß
white

Hublänge 93 mm
stroke length 93 mm



Systemgriff lösbar
*system handle
detachable*

individuelle Farbe
individual colour


Hublänge 45 mm
stroke length 45 mm



Torquer

diverse Farben
diverse colours

Handgriffe
handles

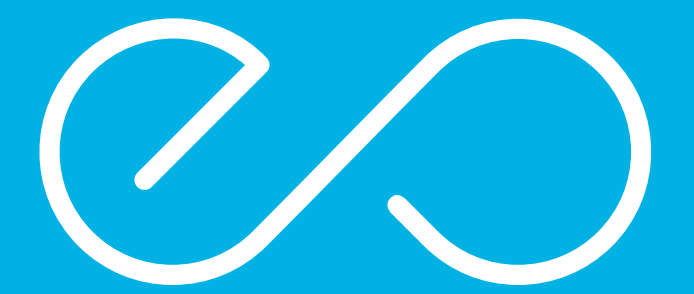

4 x 008 - 12 - CS / 090 / 2.0 French

Anzahl Drähte *number of wires*

Drahtdurchmesser *wire diameter* [inch]

Körbchendurchmesser *basket diameter* [mm]

Form *type* [A – F]

Nutzlänge *working length* [cm]

Schlauchdurchmesser *tube diameter* [French]

Bezeichnung
description