



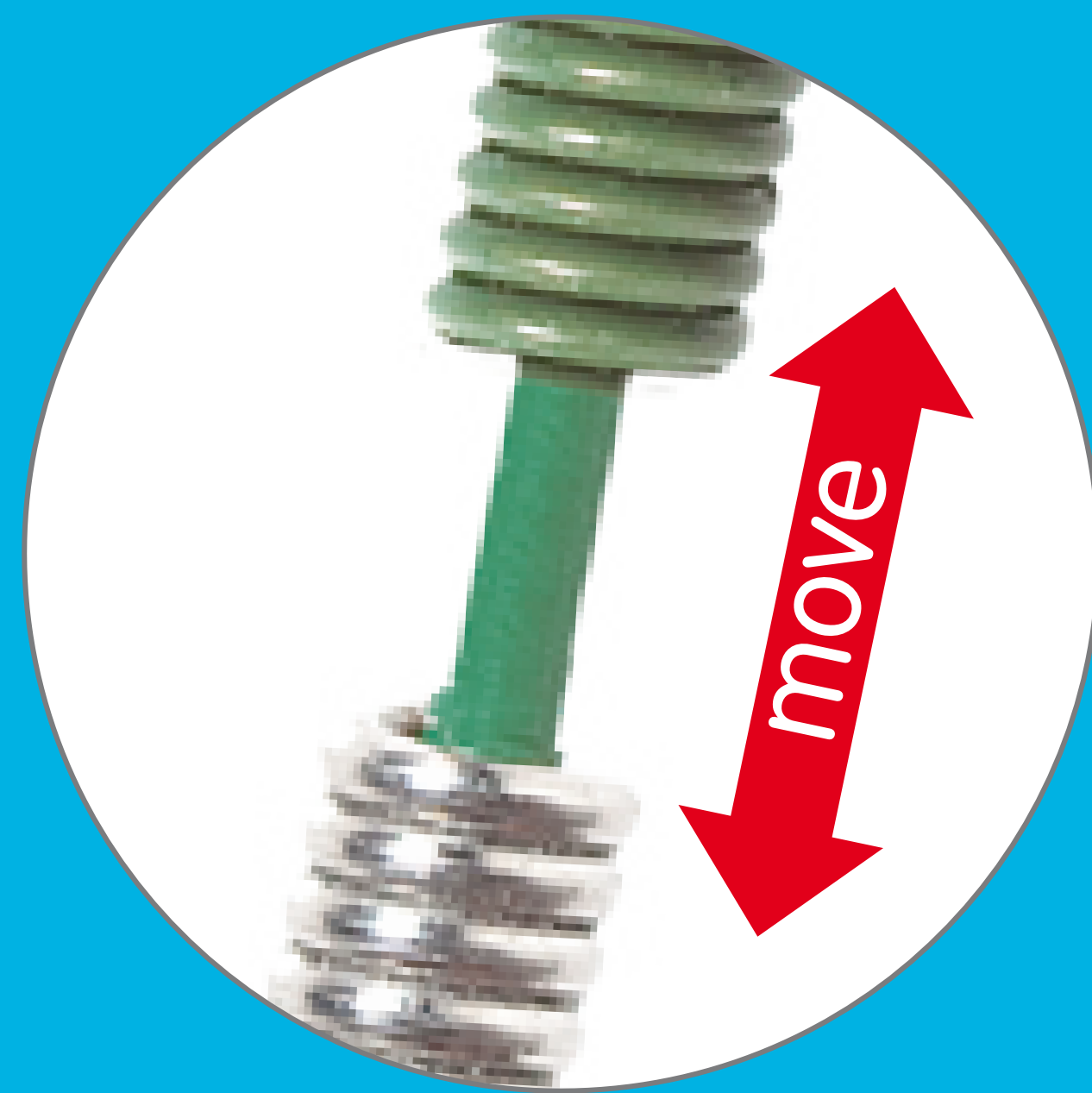

MOVABLE LINE

Führungsdrähte
Guide wires

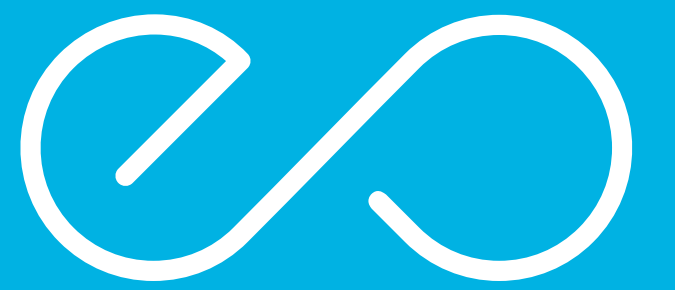

Basierend auf der Erfahrung der jahrelangen Führungsdrahtproduktion hat EPflex eine neue Generation von Edelstahl-Führungsdrähten entwickelt.

Durch die Verwendung hochwertiger Ausgangsmaterialien und durch automatisierte Serienfertigung, kann dieses hochwertige Produkt zu günstigen Preisen angeboten werden.

Based on a long experience in production of guidewires, EPflex developed a new generation of stainless steel guidewires.

By the use of high-quality raw materials and by automated volume production this high-quality guidewire can be offered for attractive prices.

Sonderleistungen

special services

Verpacken in Dispenser

*packaging in
dispenser*

Verpacken in Steriltüten

*packaging in
sterile pouches*



Etikettierung

labelling


Sterilisieren

sterilizing

Das Verschieben des Kerndrahts
steuert die Krümmung der Spitze.
Moving the core wire controls the
curvature of the tip.

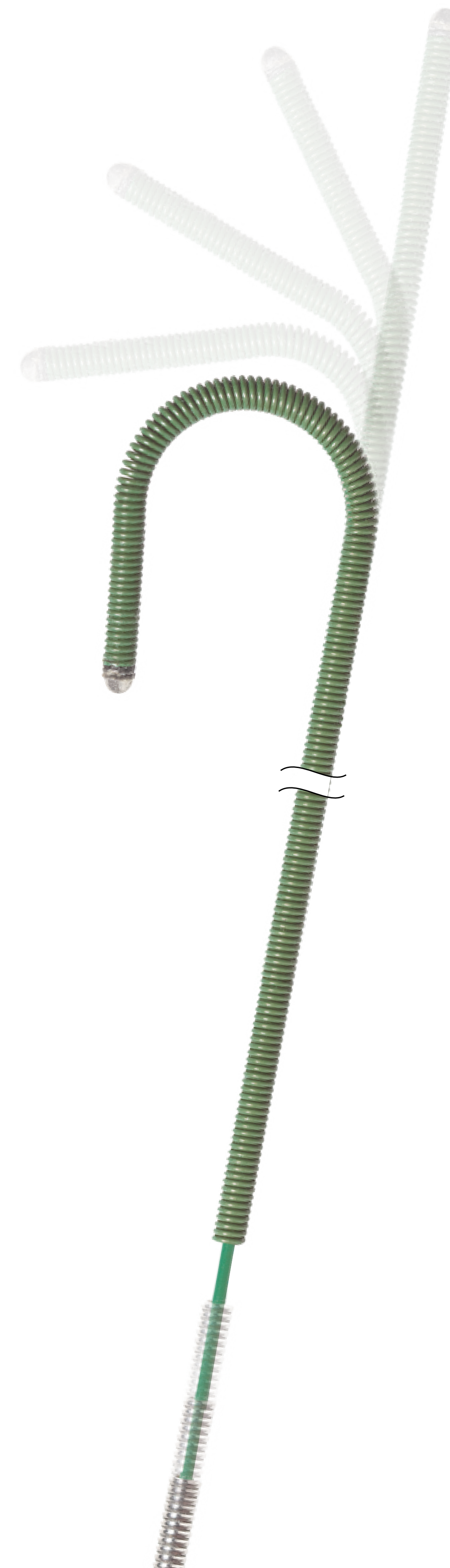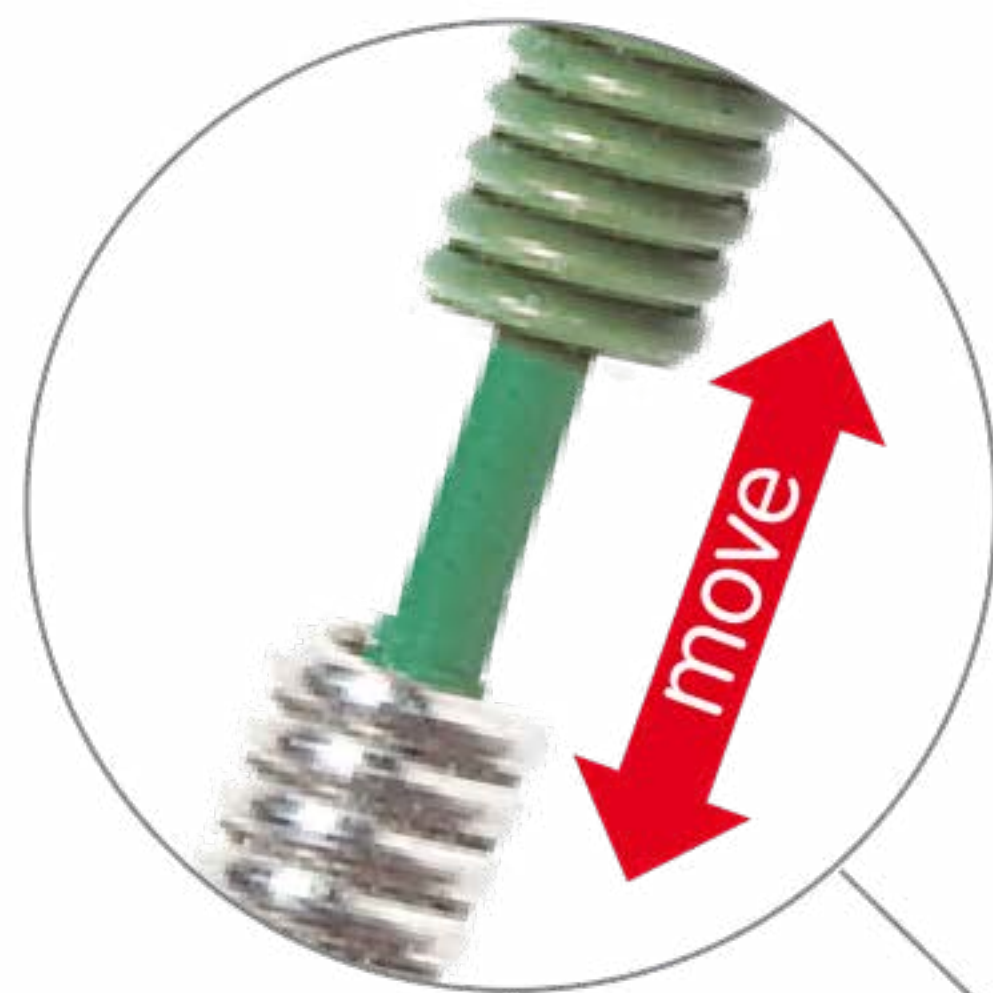


Spitzenformen tip shapes

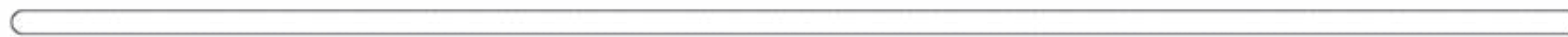


gerade straight



J-Spitze j-tip

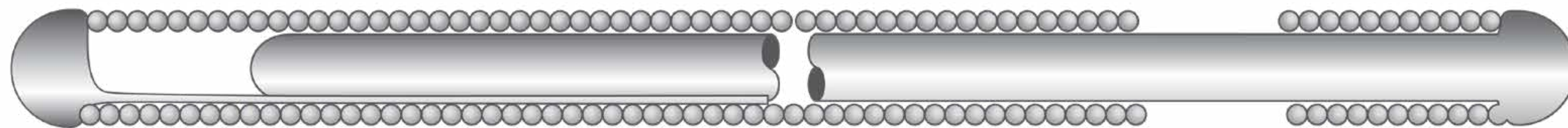

eine Seite flexibel one side flexible

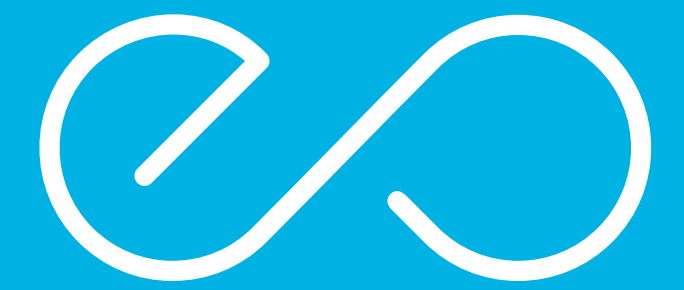

Feder Material coil material

» Edelstahl 1.4310 stainless steel 1.4310



Kernmaterial core material

- » Edelstahl 1.4310 stainless steel 1.4310
- » 304 V totgerichtet 304 V dead straight
- » Nitinol nitinol

Beschichtungen coatings



- » PTFE

variants/configurations
Varianten/Konfigurationen

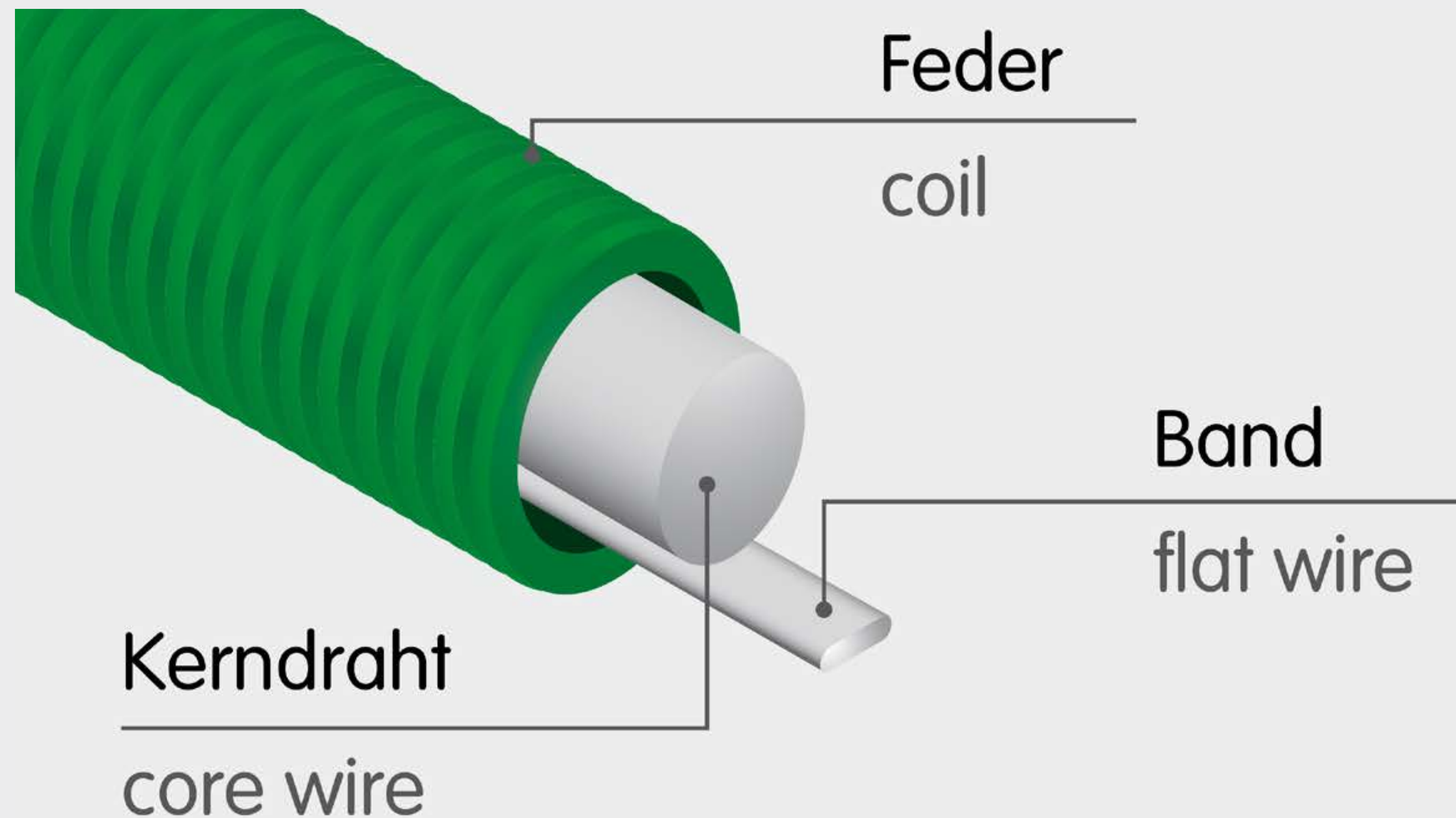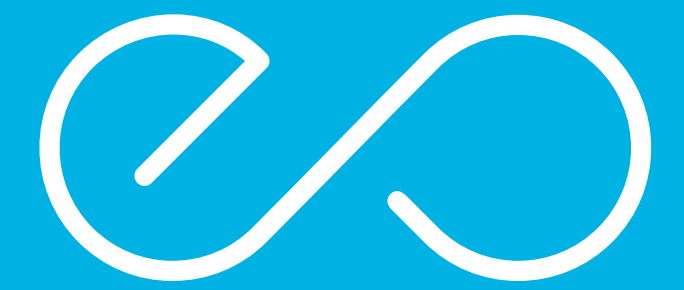

- » Schaftsteifigkeit abhängig vom Kerndrahtdurchmesser
shaft stiffness depends on core wire diameter

shaft stiffness
Schaftsteifigkeit

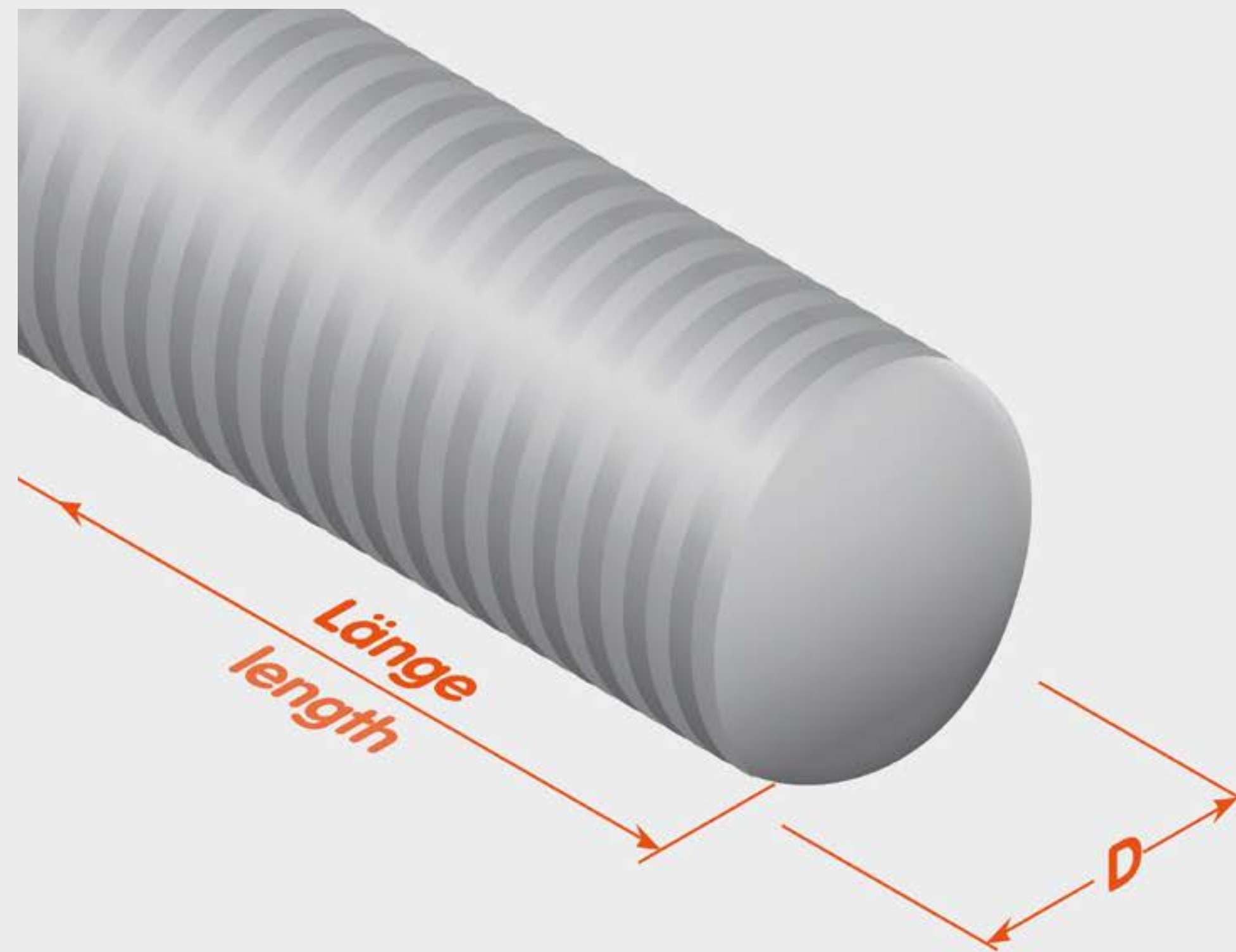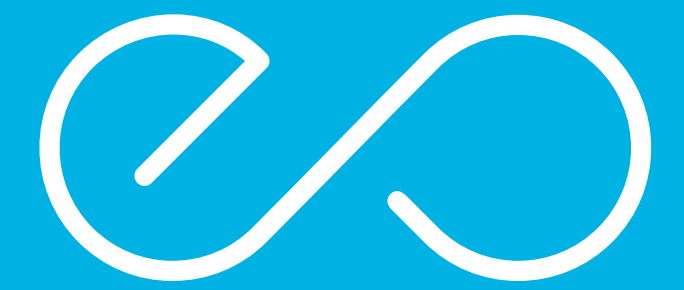

Abmessungen dimensions *

- » Durchmesser diameter 0,63-0,96 mm .025"-.038" inch*
- » Länge length bis 4800 mm up to 190" inch

dimensions
Abmessungen

* weitere Abmessungen auf Kundenwunsch
* other dimensions on customers request

